

サムテック SUM シリーズ複素比誘電率測定・厳密解析計算ソフトの Windows 10 パソコン対応手順書

1. ハードウェアキーHASP を Windows 10 パソコンへ対応させるには 。。。。

HASP キー最新バージョンドライバのダウンロード URL

<https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/>

- ① Windows 10 パソコンの Edge ブラウザを起動し、上記ダウンロード URL へアクセスする。
Featured Downloads 右下の Sentinel System Driver Installer for Sentinel SuperPro, UltraPro & SHK Windows , 3 MB, Version 7.6.0, Released 2017-09-28 のリンクをクリックする。
- ② SafeNet 社エンドユーザーライセンス合意書を確認し、IACCEPT ボタンをクリックする。
- ③ Click here to download file: のダウンロードリンクをクリックして、
Sentinel_System_Driver_Installer_7.6.0.zip 最新ドライバファイルを
Windows 10 パソコンのローカルディスクに保存する。
- ④ ダウンロード保存した Sentinel_System_Driver_Installer_7.6.0.zip を解凍する。
- ⑤ 解凍先のフォルダ内の Sentinel System Driver Installer 7.6.0.exe を右クリックして管理者として実行し、
管理者権限にてインストーラを起動してインストールを開始する。
- ⑥ 最新ドライバのインストールが完了したら、Windows 10 パソコンを再起動する。
- ⑦ HASP 暗号鍵 USB ドングルを USB ポートに挿して、赤色 LED が点灯したことを目視で確認する。
SUM シリーズソフトウェアが無事起動するのを確認したら、これまで同様に使用準備 OK です。

2. GPIB-USB アダプタ NI-488.2 を Windows 10 パソコンへ対応させるには 。。。。


納品導入時にお渡ししている GPIB-USB アダプタ NI-488.2 の CD 付属ドライバ Ver 2.7.3 を
Windows 10 パソコンにインストールして、これまで同様に、旧アジレント製 PNA シリーズ VNA を認識し制御して
自動計測を行うことが可能です。

但し、現行のキーサイト製 PNA シリーズ VNA を制御して自動計測を行うことは、
SUM シリーズ複素比誘電率測定・厳密解析計算ソフトと現行キーサイト製自動制御ライブラリとの間に
互換性がないため一切行うことはできませんのでご注意ください。

また、当社では現行キーサイト製 PNA シリーズの自動計測システム構築ならびに自動計測測定の保守サポートの
お問い合わせについて提供致しかねますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

[ご参考]

- 以下に、HASP キーの最新バージョンドライバのインストールが成功し、かつ GPIB-USB アダプタ NI-488.2 の旧ドライバ Ver 2.7.3 のインストールが成功したことによって、Windows 10 OS のデバイスマネージャ上で各デバイスがエラーなく正常に動作している状態を示します。

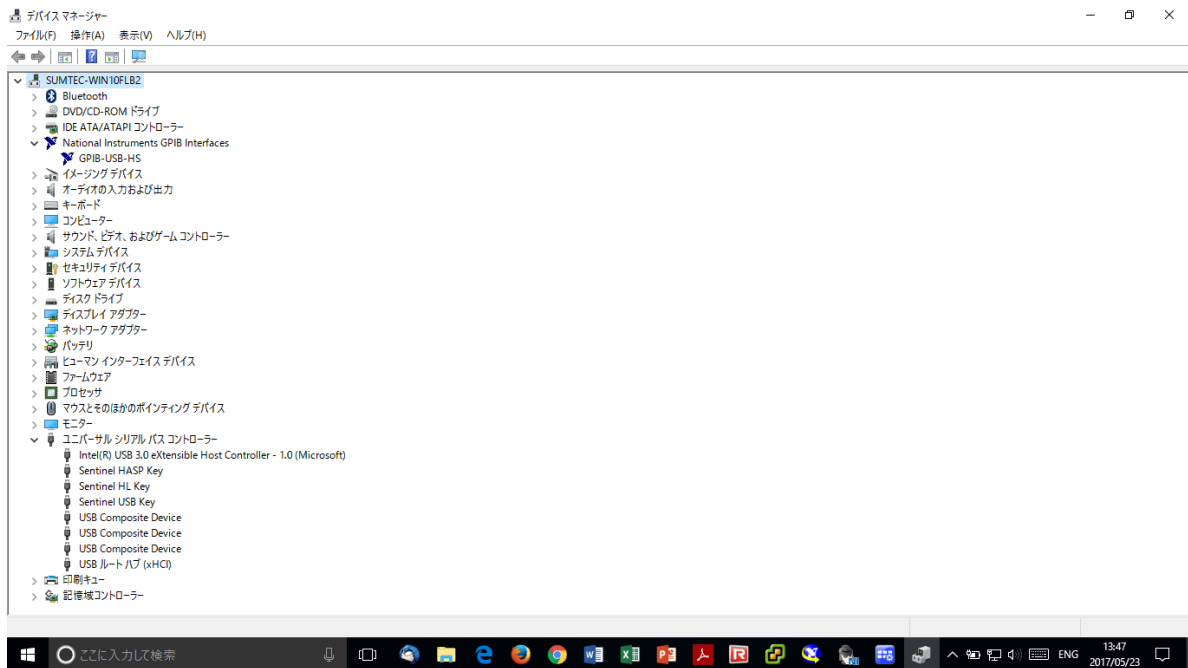

- 以下に、GPIB-USB アダプタ NI-488.2 の旧ドライバ Ver 2.7.3 のインストールが成功したことによって、NI Measurement & Automation Explorer ソフトを用いて計測器をスキャン後に、旧アジレント製 PNA シリーズ VNA を認識し制御して自動計測を行える状態を示します。

